


MADMTM

MODULE D'ADMINISTRATION
D'ANESTHÉSIE

Guide de démarrage rapide

**THORNHILL
MEDICAL**

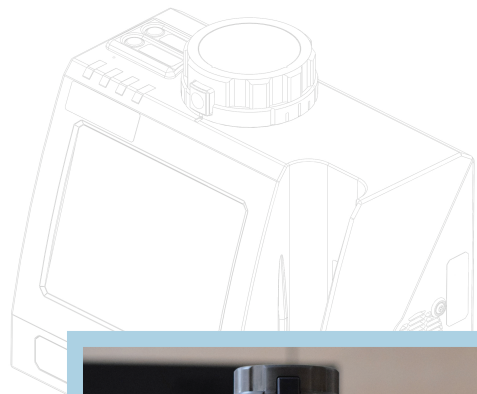

1. Remplissez le réservoir d'ISO OU DE SÉVO du MADM™ avec l'anesthésique liquide approprié.




2. Placez le MADM™ sur une surface plane ou fixez la pince et orientez-la en position verticale.

3. Insérez le réservoir d'anesthésique dans le MADM™.

4. Connectez le capteur d'anesthésique buccal du patient au MADM™. Assurez-vous qu'un adaptateur pour voies respiratoires est installé dans le capteur.


5. Assurez-vous que le capteur d'entrée d'anesthésique est complètement inséré dans le MADM™.

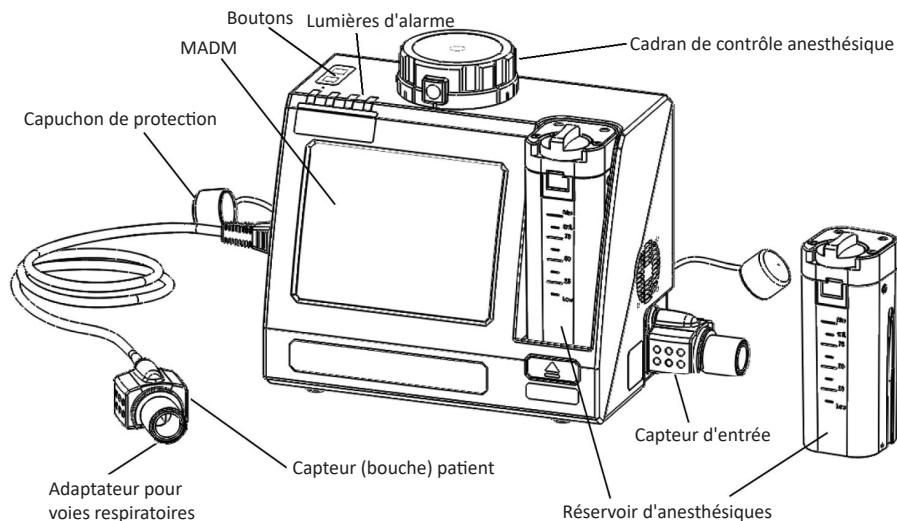

6. Connectez l'alimentation externe et allumez le MADM™ en appuyant sur le bouton d'alimentation (sur le panneau ARRIÈRE) en position marche.




7. Laissez les capteurs d'anesthésique d'entrée et du patient du MADM™ se réchauffer.

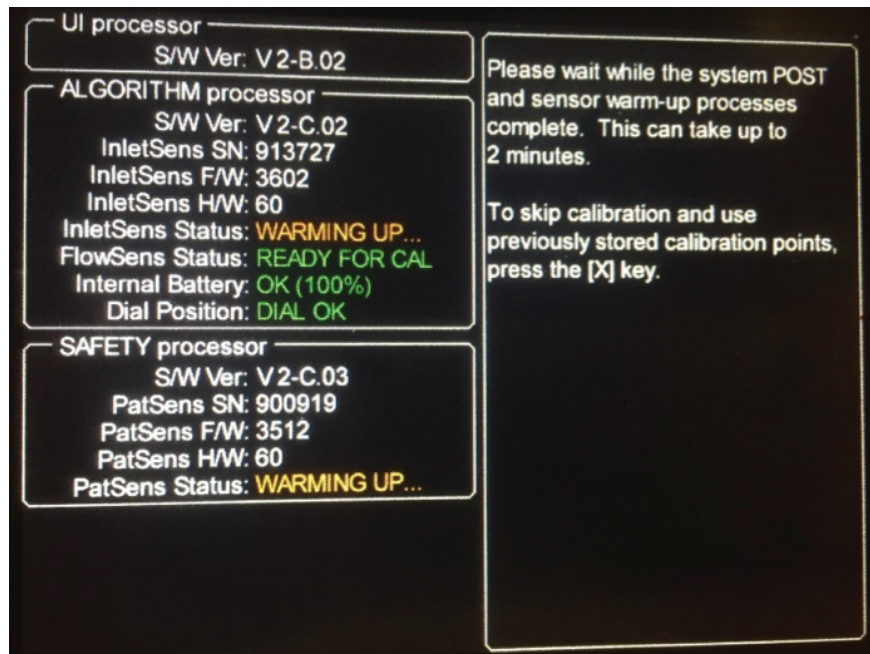


8. Préparez le MADM™ pour effectuer une autovérification avant l'utilisation en suivant les instructions à l'écran.


REMARQUE : Si le message à l'écran « EVALUATING GAZ (Évaluation du gaz) » persiste pour l'un ou l'autre des capteurs de gaz anesthésiques, purgez ce capteur avec du gaz frais (de préférence de l'air).

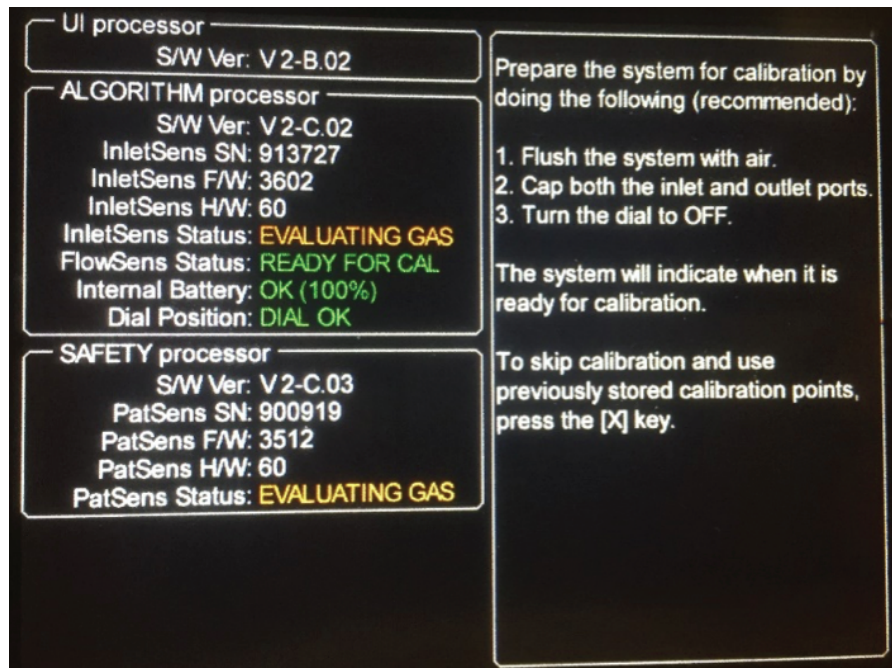

9. Le MADM™ indiquera quand il sera prêt à effectuer l'autovérification avant l'utilisation.

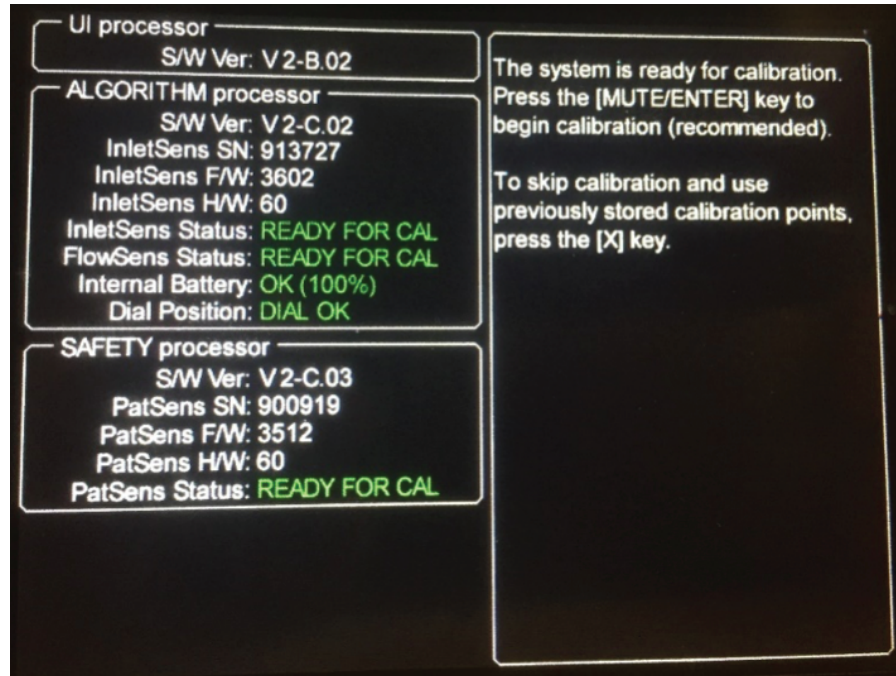


10. Lancez la vérification automatique de préutilisation du MADM™ en appuyant sur le bouton [MUTE/ENTER (Sourdine/Entrer)] (sur le panneau SUPÉRIEUR).

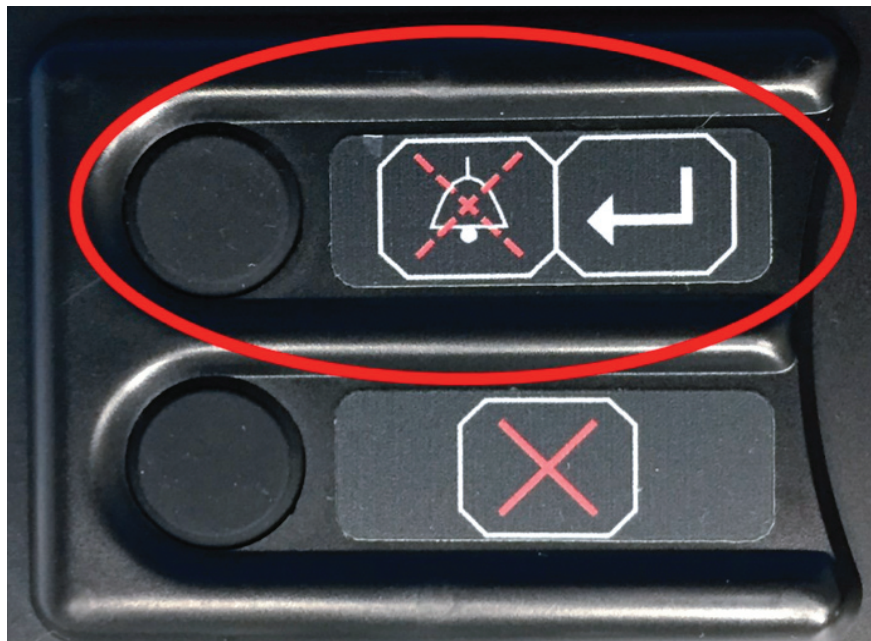


11. Si l'autovérification se passe correctement, le MADM™ passera à l'écran de saisie du poids. Suivez les instructions à l'écran pour spécifier et confirmer la plage de poids appropriée pour le patient. Le cadran anesthésique sera utilisé pour sélectionner la plage de poids et le bouton [MUTE/ENTER (Sourdine/Entrer)] pour confirmer la sélection. Le cadran doit être remis en position OFF (Arrêt) pour continuer.

REMARQUE : Si la préutilisation de l'autovérification échoue ou la mauvaise plage de poids du patient est confirmée, le MADM™ doit être mis hors tension et ce processus doit être redémarré.

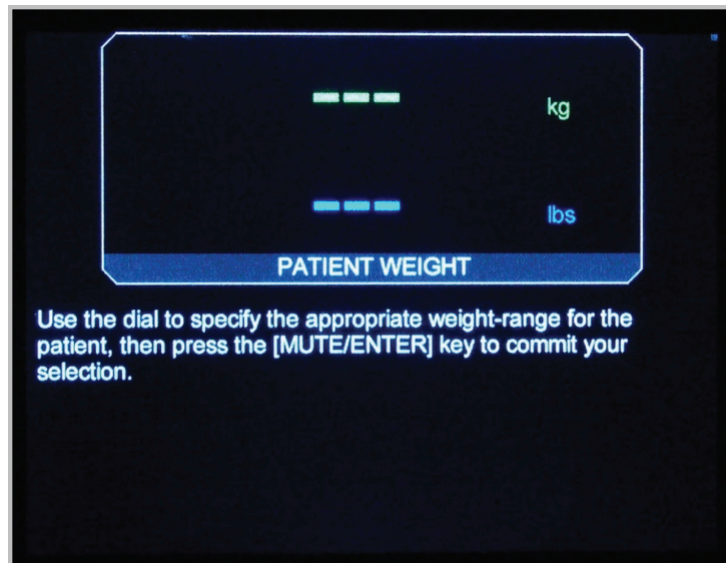


12. Connectez le MADM™ au ventilateur à circuit ouvert ou fermé. Utilisez la tubulure patient de 91 cm (36 po) fournie pour connecter la sortie du ventilateur au capteur d'entrée MADM™.


Circuit ouvert

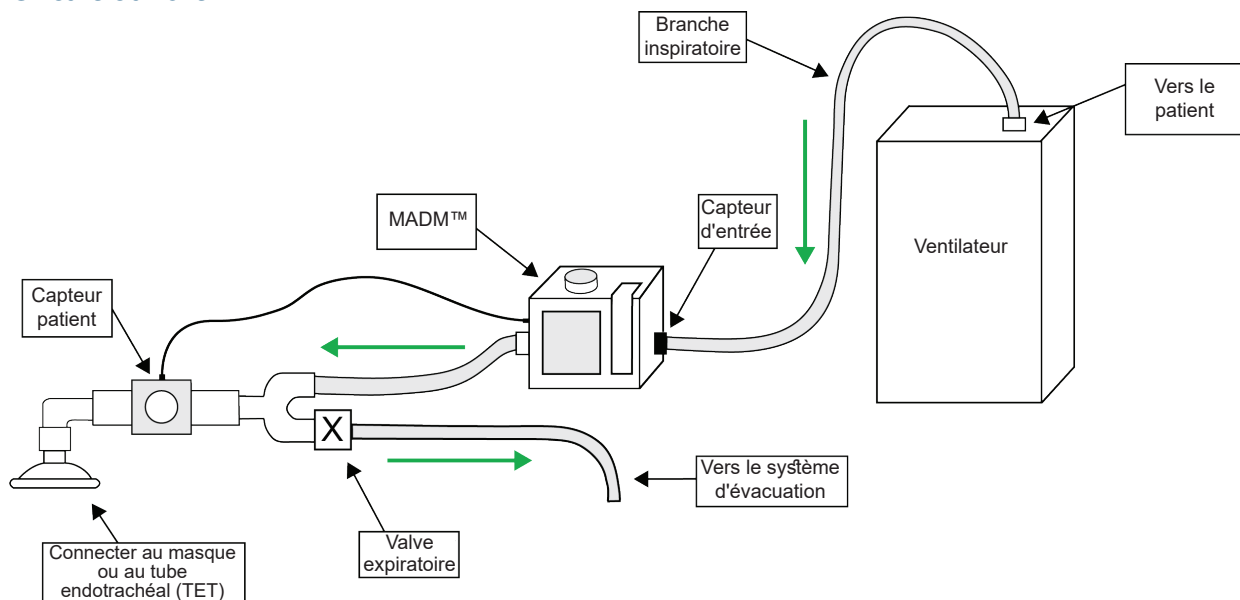

Circuit fermé

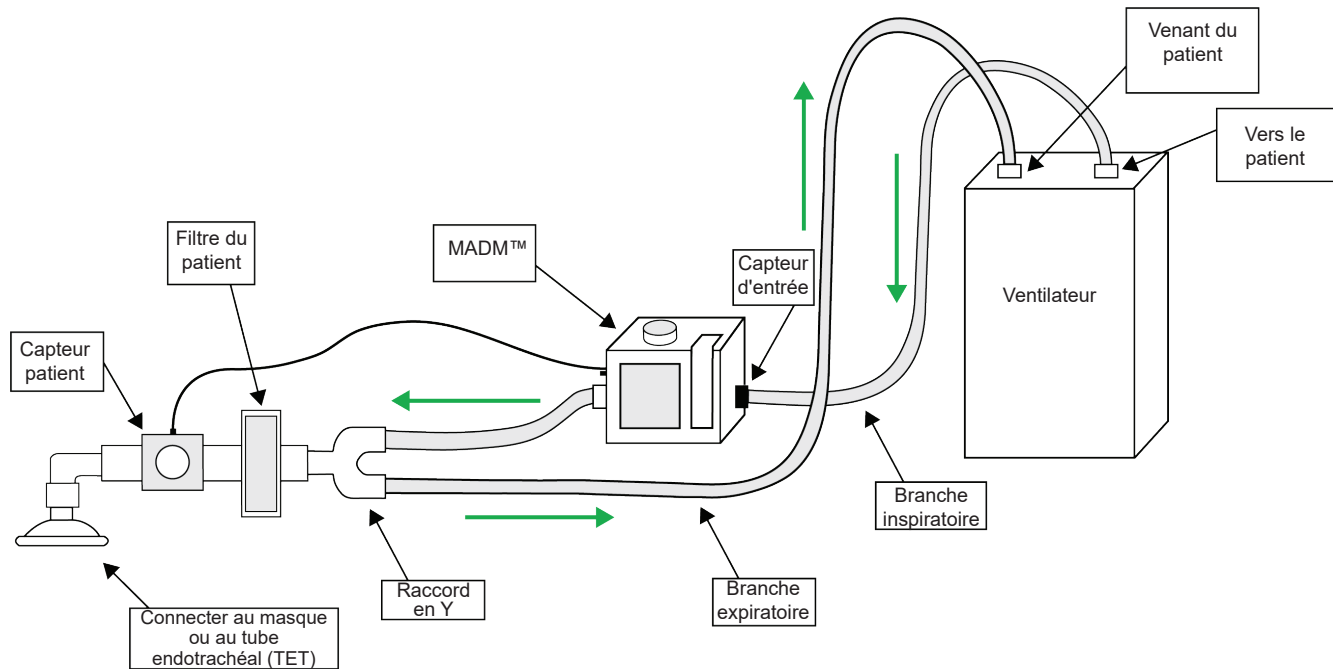

13. Commencez à ventiler le patient et réglez la concentration d'anesthésique souhaitée (FiA SET [(concentration d'anesthésiques inspiratoires fractionnée réglée (CFAI)] à l'aide du cadran de contrôle de l'anesthésique du MADM™.

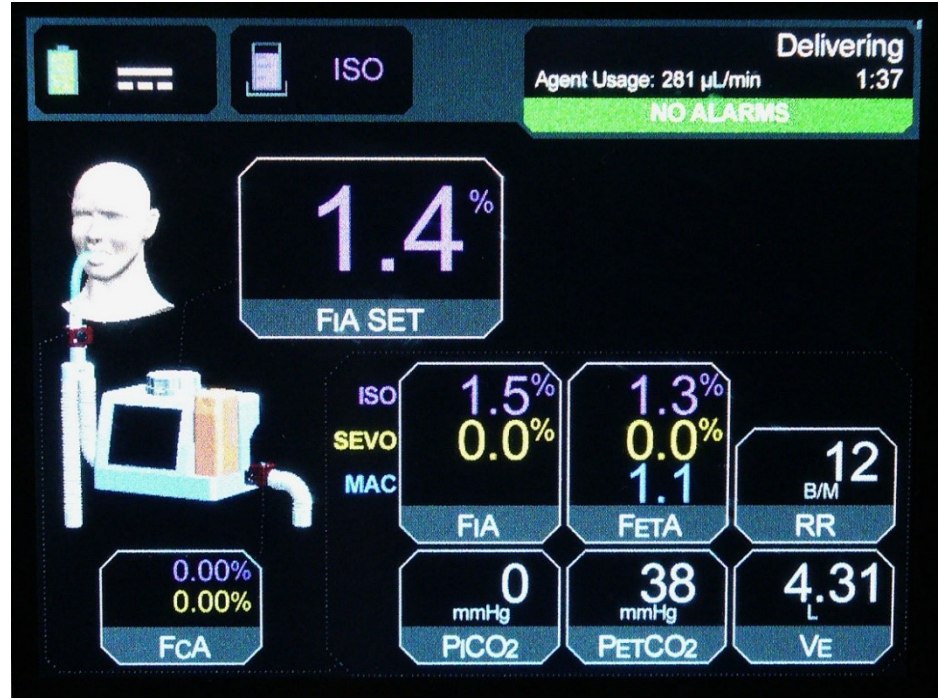

Guide de démarrage rapide du module d'administration d'anesthésie du MADM™

Ce guide contient des informations résumées du manuel de l'opérateur MADM™ (P/N 129275 révision A)
Veuillez vous référer à la dernière révision pour des informations complètes sur le MADM™.

Thornhill Research inc. se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques à tout moment sans préavis ni obligation et ne sera pas responsable des conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

© 2021 Thornhill Research Inc. Tous droits réservés. MADM™ est une marque de commerce de Thornhill Research Inc.



www.thornhillmedical.com

Courriel : info@thornhillresearch.com

Numéro de téléphone : 1 888 597-1325 (sans frais)