


MADMTM

Moduł podawania środków
anestetycznych

Skrócona instrukcja

THORNHILL
MEDICAL

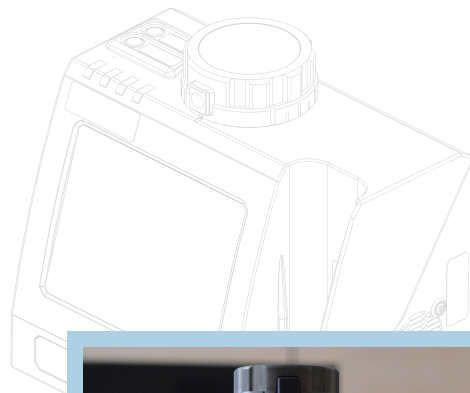

1. Napełnij pojemnik ISO lub SEVO modułu MADM™ odpowiednim płynnym środkiem anestetycznym.




2. Umieść moduł MADM™ na poziomej powierzchni lub zamocuj zacisk i ustaw go w pozycji pionowej.

3. Wprowadź do modułu MADM™ pojemnik ze środkiem anestetycznym.

4. Podłącz do modułu MADM™ czujnik ustny środka anestetycznego pacjenta. Upewnij się, że na czujniku zainstalowany jest adapter do rurki intubacyjnej.


5. Upewnij się, że czujnik środka anestetycznego na wlocie jest całkowicie wprowadzony do modułu MADM™.

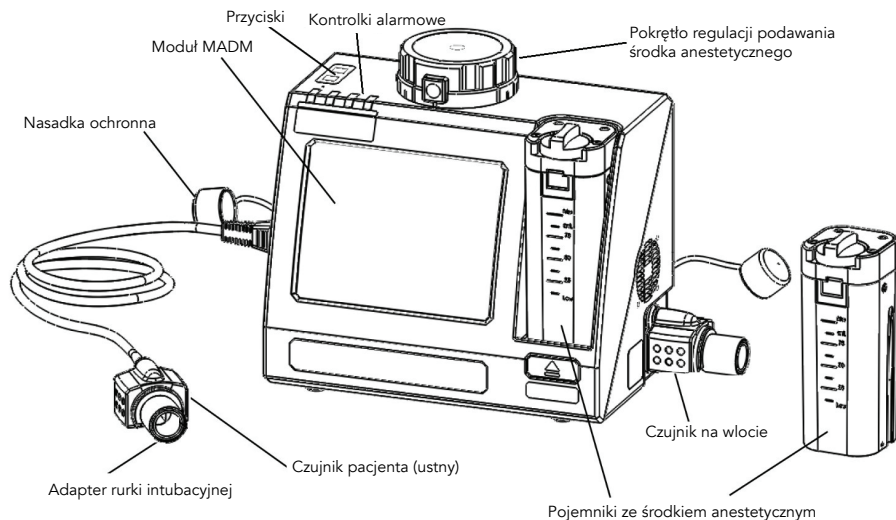

6. Podłącz zasilanie z zewnętrznego źródła i włącz moduł MADM™ poprzez naciśnięcie przycisku zasilania (na TYLNYM panelu) i ustawienie go w pozycji włączonej.



7. Oczekaj, aby nastąpiło nagrzanie się czujnika na wlocie do modułu MADM™ i czujnika ustnego środka anestetycznego pacjenta.

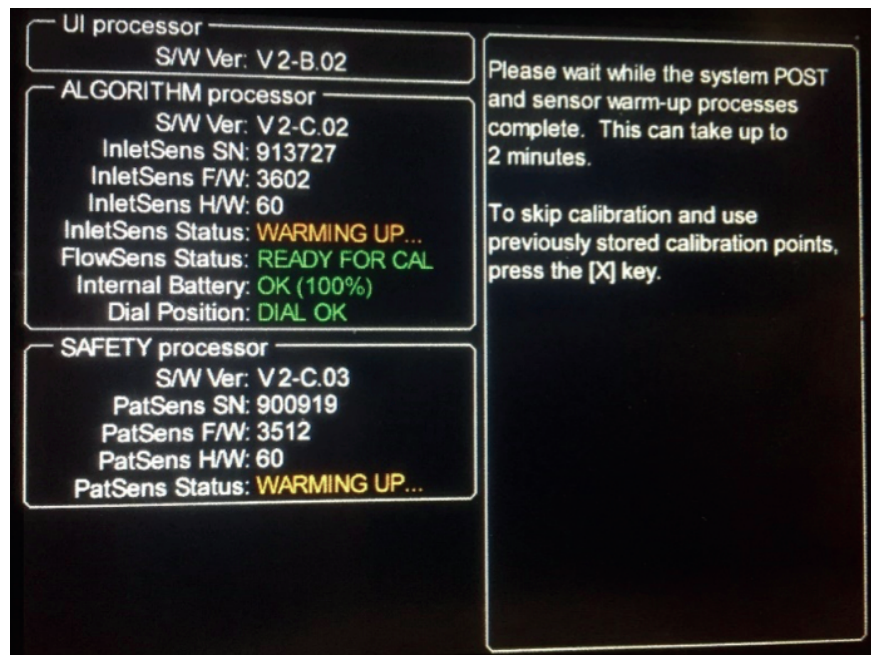

8. Postępując według instrukcji na ekranie przygotuj moduł MADM™ do wykonania autotestu przed użyciem urządzenia.

UWAGA! Jeżeli w przypadku któregośkolwiek czujnika gazu anestetycznego będzie utrzymywać się wyświetlany na ekranie komunikat „EVALUATING GAS” (TRWA OCENA GAZU), prze-czyść czujnik świeżym gazem (najlepiej powietrzem).

UI processor
S/W Ver: V 2-B.02

ALGORITHM processor
S/W Ver: V 2-C.02
InletSens SN: 913727
InletSens F/W: 3602
InletSens H/W: 60
InletSens Status: **EVALUATING GAS**
FlowSens Status: **READY FOR CAL**
Internal Battery: **OK (100%)**
Dial Position: **DIAL OK**

SAFETY processor
S/W Ver: V 2-C.03
PatSens SN: 900919
PatSens F/W: 3512
PatSens H/W: 60
PatSens Status: **EVALUATING GAS**


Prepare the system for calibration by doing the following (recommended):

1. Flush the system with air.
2. Cap both the inlet and outlet ports.
3. Turn the dial to OFF.


The system will indicate when it is ready for calibration.

To skip calibration and use previously stored calibration points, press the [X] key.

9. Moduł MADM™
poinformuje o gotowości
wykonania autotestu przed
użyciem urządzenia.

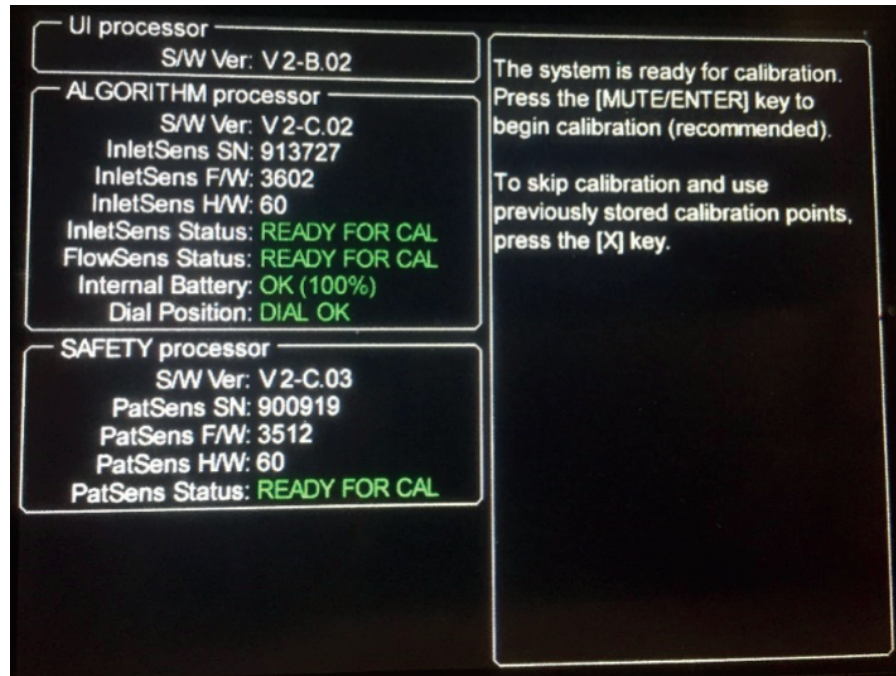


10. Zainicjuj autotest
przed użyciem modułu MADM™
poprzez naciśnięcie
przycisku [MUTE/ENTER]
[WYCISZ/WPROWADŹ]
(na GÓRNYM panelu).

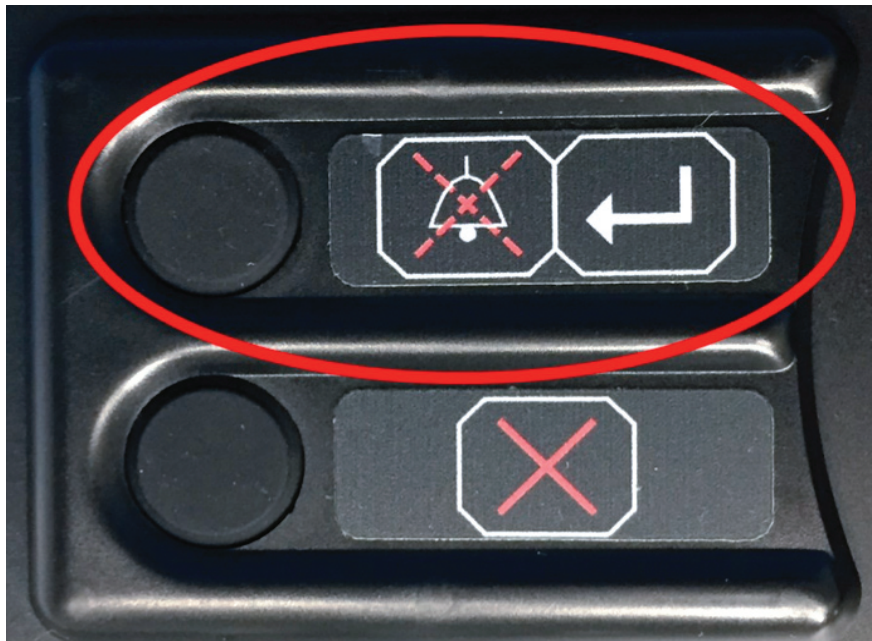

11. Jeżeli wynik autotestu przed użyciem urządzenia jest OK (pozytywny), moduł MADM™ przejdzie do ekranu Weight Entry (wprowadzenie masy ciała). Postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie określ i potwierdź właściwy dla pacjenta zakres masy ciała.


W celu wybrania zakresu masy ciała należy użyć pokrętki regulacji podawania środka anestetycznego, a do potwierdzenia wyboru przycisku [MUTE/ENTER] [WYCISZ /WPROWADŹ]. Aby kontynuować, pokrętło należy ustawić w pozycji OFF (WYŁ).

UWAGA! Jeżeli wynik autotestu przed użyciem urządzenia będzie negatywny lub zostanie potwierdzony nieprawidłowy zakres masy ciała pacjenta, moduł MADM™ należy wyłączyć i od początku wykonać wyżej opisaną procedurę.

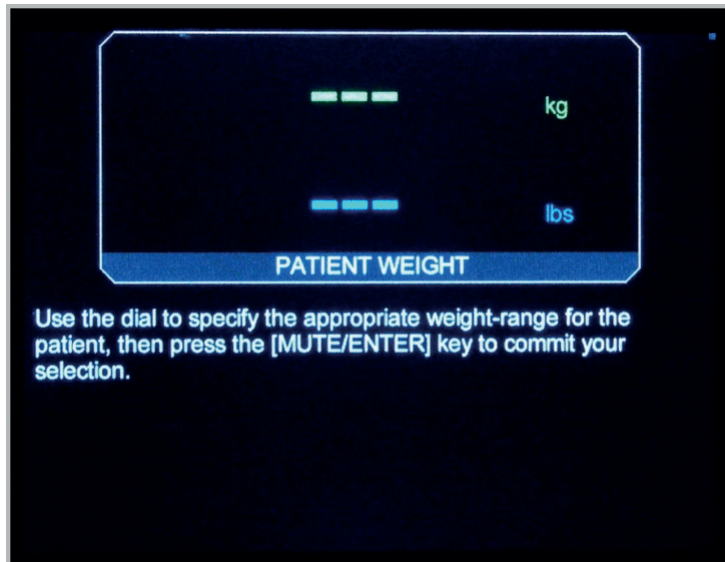


12. Podłącz moduł MADM™ do wentylatora z obwodem otwartym lub zamkniętym. Używając załączonego do zestawu przewodu pacjenta 36" (91,44 cm) podłącz wylot wentylatora do czujnika na wlocie modułu MADM™.


Obwód otwarty

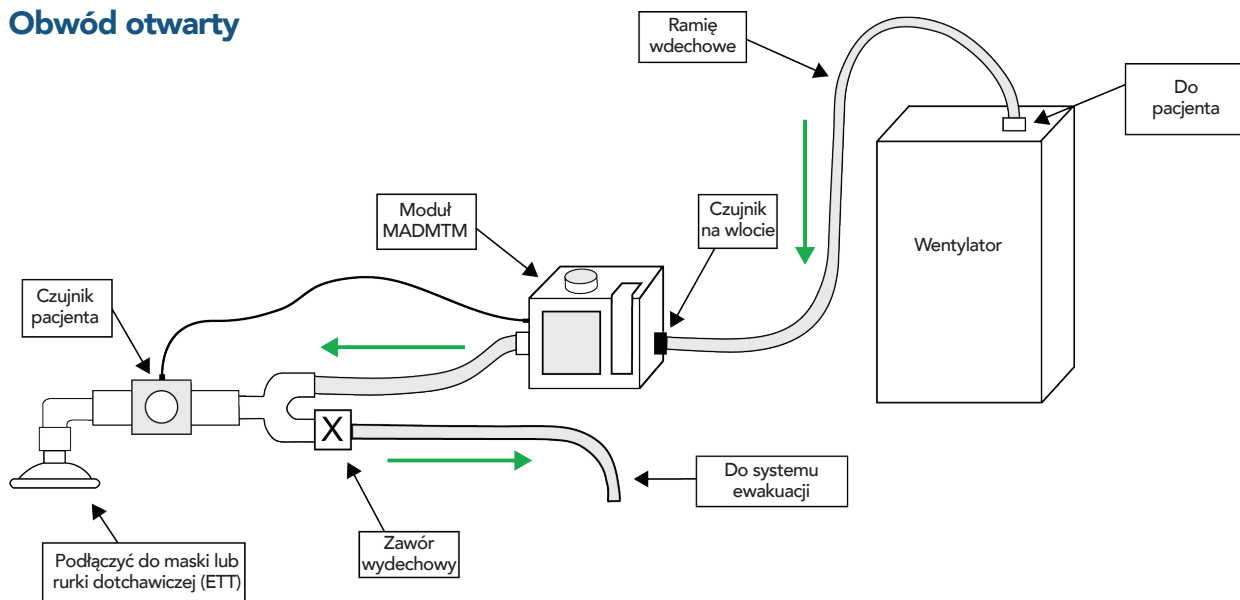

Obwód zamknięty

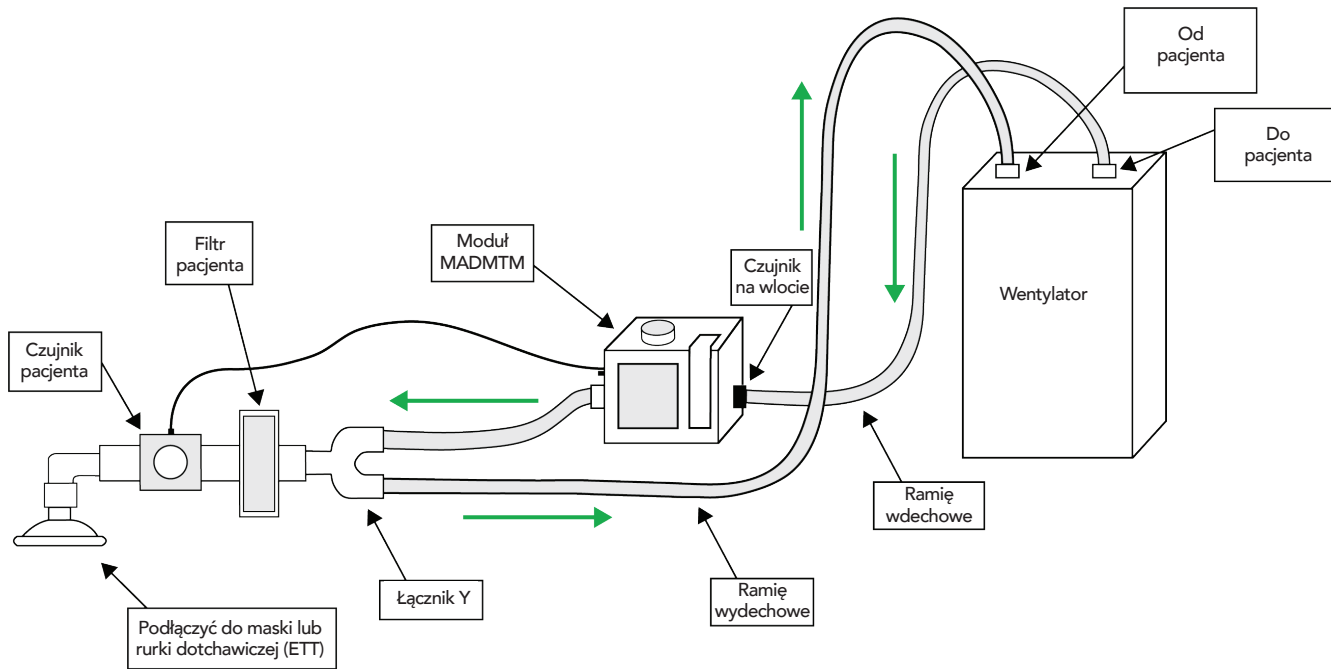

13. Rozpocznij wentylację pacjenta i ustaw pożądane stężenie środka anestetycznego (FIA SET) za pomocą pokręćła regulacji podawania środka anestetycznego na module MADM™.

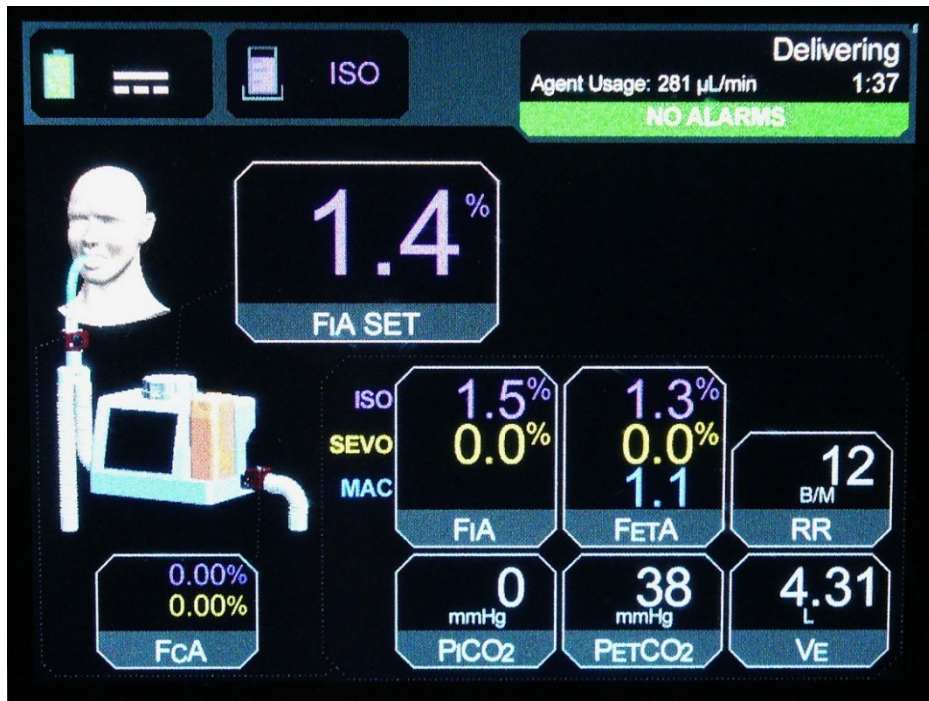

Skrócona instrukcja używania modułu MADM™ do podawania środka anestetycznego

Niniejsza instrukcja zawiera skrót informacji zawartych w Podręczniku operatora modułu MADM™ (nr kat. 124764). Pełne informacje dotyczące modułu MADM™ dostępne są w najnowszej wersji.

Firma Thornhill Research Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia oraz jakichkolwiek zobowiązań; firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki wynikłe z użycia niniejszej publikacji.

© 2019 Thornhill Research Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. MADM™ jest znakiem towarowym Thornhill Research Inc.

THORNHILL MEDICAL

Strona internetowa: www.thornhillmedical.com
E-mail: info@thornhillresearch.com
Telefon: 1-888-597-1325 (bezpłatny)