

ВІДКРИТТЯ MOVES® SLC™

Мікроінтегрована портативна система життєзабезпечення

Ознайомтеся з MOVES® SLC™: від багатофункціональної системи до міцного кейса для аксесуарів, доступних витратних матеріалів і комплексної навчальної та сервісної підтримки, доступної для всіх.

Військові, гуманітарні підрозділи та підрозділи екстреної медичної допомоги модернізуються для ведення великомасштабних бойових операцій (LSCO), багатовимірних операцій (MDO), ліквідації наслідків стихійних лих, реагування на масові ураження та інші надзвичайні ситуації.



Виклик

Такі умови можуть бути суворими, важкодоступними, з великою кількістю постраждалих, ускладненими тривалим утриманням пацієнтів у неналежно оснащених імпровізованих місцях надання допомоги, ізольованими через порушення ланцюгів постачання, а також пов'язаними з «тиранією відстані» під час евакуації на доступних транспортних засобах — у будь-якому поєднанні.

Вирішення виклику

Медичні підрозділи мають бути гнучкими, мобільними та самодостатніми. І їх повинні підтримувати технології, які є компактнішими, легшими, міцнішими, інтуїтивно зрозумілими та простими в обслуговуванні, забезпечуючи можливості інтенсивної терапії якомога ближче до осередку потреби.

MOVES® SLC™ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНЕ.

ПОГОВОРІТЬ З КОМАНДОЮ

thornhillmedical.com/ukraine


Signal +380-93-825-5440 | WhatsApp +380-93-825-5440

ukraine@thornhillmedical.com

**THORNHILL
MEDICAL**
Inspiring Innovation

Система MOVES® SLC™

MOVES® SLC™ — це мікроінтегроване рішення для життєзабезпечення, що поєднує концентратор кисню, унікальний апарат ШВЛ зі збереженням O₂, аспірацію та повний моніторинг життєвих показників в одному міцному портативному пристрої з живленням від акумулятора, без потреби у важких і небезпечних кисневих балонах.

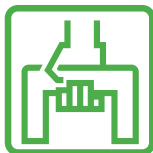

Портативний

- Працює від акумулятора
- Легка вага: 18,12 кг (39,95 фунта) без акумуляторів та вуглеводневого фільтра
- Компактний: 33,1" x 6,55" x 10,35" без вуглеводневого фільтра



Міцний

- Протестовано для гвинтокрилих літальних апаратів і літаків із нерухомим крилом (реактивних, турбогвинтових), а також наземних транспортних засобів
- Від мінусових температур до пустельного клімату
- Багатовимірне поле бою



Концентратор кисню

- Рециркулює видихуване повітря
- Кисневе лікування відповідно до стандарту медичної допомоги



Апарат ШВЛ для зони бойових дій

- Збереження кисню
- 5-режимний апарат ШВЛ



Повний континуум медичної допомоги

- Контроль пошкоджень у постраждалих
- Тривала медична допомога в польових умовах
- Евакуація



Аспірація

- Рідини, тканини, кістки
- Регулюється в діапазоні тиску від -100 мм рт.ст. до -325 мм рт.ст.



ЗАВАНТАЖТЕ ФУНКЦІЇ ТА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MOVES® SLC™

ПОГОВОРІТЬ З КОМАНДОЮ

thornhillmedical.com/ukraine

Signal +380-93-825-5440 | WhatsApp +380-93-825-5440

ukraine@thornhillmedical.com

**THORNHILL
MEDICAL**
Inspiring Innovation


MOVES® SLC™

Кейс для приладдя



Кожна система MOVES® SLC™ постачається з аксесуарами, розміщеними в міцному, надійному й добре організованому кейсі Pelican, щоб усе необхідне було легкодоступним і захищеним.

Від манжет для вимірювання артеріального тиску різних розмірів до пальцевих датчиків SpO₂, ременя для перенесення, затискачів і кабелів — кейс для приладдя містить різноманітні варіанти для максимально гнучкого надання допомоги в широкому спектрі операційних сценаріїв. Команда Thornhill Medical проконсультує вас щодо функції кожного аксесуара MOVES® SLC™ для досягнення найкращих результатів.

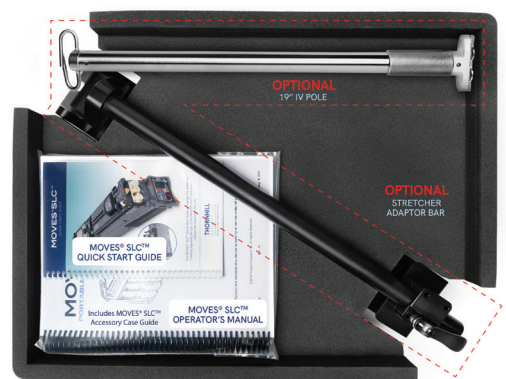

ЗАВАНТАЖТЕ ПОСІБНИК
З ПРИЛАДДЯ MOVES® SLC™

ПОГОВОРІТЬ З КОМАНДОЮ

thornhillmedical.com/ukraine

Signal +380-93-825-5440 | WhatsApp +380-93-825-5440

ukraine@thornhillmedical.com

**THORNHILL
MEDICAL**
Inspiring Innovation

MOVES® SLC™

Витратні матеріали

У процесі введення MOVES® SLC™ в експлуатацію вам знадобляться як вироби для використання в одного пацієнта, так і компоненти для періодичної заміни, щоб забезпечити найвищий стандарт медичної допомоги та підтримувати обладнання в оптимальному робочому стані. Команда Thornhill Medical співпрацюватиме з вами, щоб зрозуміти ваші операційні параметри та надати рекомендації щодо початкової конфігурації й графіка заміни витратних матеріалів.



Фірмові витратні матеріали MOVES® SLC™

Картридж апарата ШВЛ

Картридж апарата ШВЛ (для використання лише в одного пацієнта) забезпечує вентиляцію з позитивним тиском для інтубованих пацієнтів за умови використання з циркуляційною системою. Цей фірмовий картридж апарата ШВЛ очищує дихальну газову суміш пацієнта від CO₂, запобігаючи накопиченню CO₂ і безперервно забезпечуючи пацієнта придатною для дихання газовою сумішшю.



Дихальний контур

Картридж апарата ШВЛ використовується разом із дихальним контуром апарата ШВЛ, який містить фільтр для пацієнта. Дихальний контур апарата ШВЛ також оснащений лінією відбору проб газу, під'єднаною від Y-конектора до порту Gas Sample (Проба газу) на панелі підключення пацієнта на пристрої, що дає системі змогу виявляти та вимірювати концентрацію O₂ і CO₂ у контурі, коригуючи подачу кисню за потреби.



ПОГОВОРІТЬ З КОМАНДОЮ

thornhillmedical.com/ukraine

Signal +380-93-825-5440 | WhatsApp +380-93-825-5440

ukraine@thornhillmedical.com

**THORNHILL
MEDICAL**
Inspiring Innovation

MOVES® SLC™

Навчання

Все в кейсі

MOVES® SLC™ повністю оснащений навчальними ресурсами та доступом до наших команд навчання та сервісного обслуговування. Просто відкрийте кейс аксесуарів MOVES® SLC™, щоб знайти широкий набір інформативних інструментів для підтримки вас і вашої команди.

Особисте навчання

Потрібне повномасштабне впровадження в кількох локаціях? Віддаєте перевагу формату «навчання тренерів»? У вас є різні категорії медичних фахівців?

Наші кваліфіковані професійні тренери реалізують навчальну програму під час очних тренінгових сесій для повного занурення. Ми співпрацюватимемо з вами, щоб розробити формат, періодичність і локації, які підтримують вашу місію.


Навчання на вимогу та мобільний додаток

Навчальна команда розробила серію доступних ресурсів, які демонструють налаштування та роботу системи MOVES® SLC™. Вони доступні на вимогу 24/7 на нашому вебсайті та через мобільний застосунок, щоб підтримувати вас на кожному етапі.

Мобільний застосунок забезпечує функціональність в офлайн-режимі — життєво важливу можливість для тих, хто може не мати доступу до інтернету під час надання допомоги постраждалим і пацієнтам в екстремальних умовах.

Навчальні відео

Перегляньте відеотеку MOVES® SLC™, щоб дізнатися більше про систему на загальному рівні або детально ознайомитися з її характеристиками, функціональними можливостями та принципами роботи з технологією.

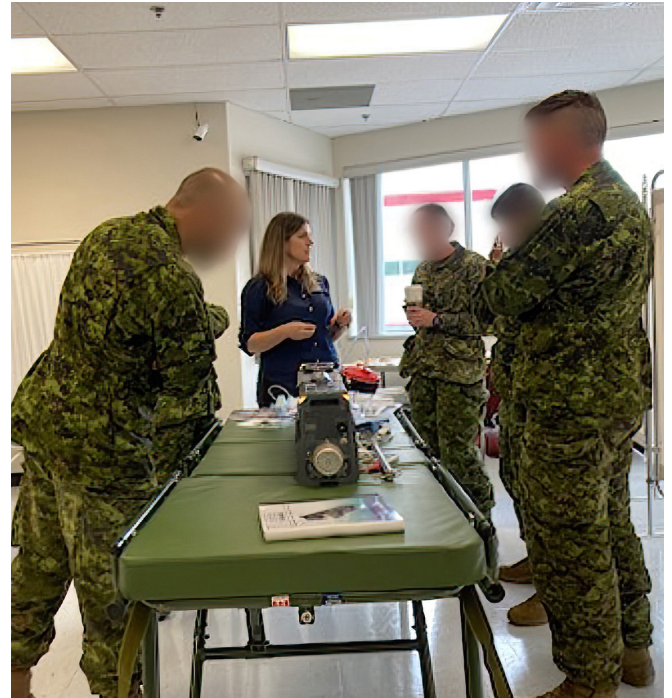

ОЗНАЙОМТЕСЯ З
ВІДЕОТЕКОЮ MOVES® SLC™.



ПОГОВОРІТЬ З КОМАНДОЮ

thornhillmedical.com/ukraine

Signal +380-93-825-5440 | WhatsApp +380-93-825-5440

ukraine@thornhillmedical.com

THORNHILL
MEDICAL
Inspiring Innovation

MOVES® SLC™

Сервіс

Наша команда пропонує низку варіантів підтримки та сервісного обслуговування, які найкраще відповідають вашим конкретним операційним потребам і забезпечують готовність MOVES® SLC™ до використання та його оптимальний робочий стан.

Усунення несправностей

Наша кваліфікована команда технічних експертів із продукту, інженерів і біомедичних техніків готова оперативно знаходити відповіді на ваші запитання щодо MOVES® SLC™. Наша команда співпрацює з вашою, щоб ретельно й ефективно впроваджувати рішення для сталого та результативного використання MOVES® SLC™.

Сервісне навчання

Маєте власних штатних біомедичних техніків або команду з технічного обслуговування медичних виробів? Для MOVES® SLC™ пропонується навчання з сервісного обслуговування. Ідеально підходить у випадках, коли ваша власна програма сервісної підтримки найкраще пристосована для виконання профілактичного технічного обслуговування та ремонту. Наше навчання з сервісного обслуговування розроблене з урахуванням потреб вашої операційної моделі.

Вибір

Від послуг на вимогу без довгострокових зобов'язань до планового та регламентного технічного обслуговування — ми співпрацюватимемо з вами, щоб створити оптимальне сервісне рішення для вашого MOVES® SLC™.



ЗАВАНТАЖТЕ СЕРВІСНУ
БРОШУРУ MOVES® SLC™

ПОГОВОРІТЬ З КОМАНДОЮ

thornhillmedical.com/ukraine

Signal +380-93-825-5440 | WhatsApp +380-93-825-5440

ukraine@thornhillmedical.com

THORNHILL
MEDICAL
Inspiring Innovation